

PTCA球囊扩张导管

PTCA Balloon Catheter

规格参数

球囊直径 (mm)	1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0
球囊长度(mm)	9,10,12,14,15,16,20,24,25,30
球囊名义压力(atm)	6
额定爆破压力(atm)	16
最大使用导丝(inch)	0.014
导管有效长度(mm)	1400
远端外径(F)	2.7
近端推杆外径(F)	2.1
通过病变最小直径(inch)	0.0165



普霖医疗科技（广州）有限公司
地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503
电话：020-82112462
传真：020-82119811
邮箱：sale@pulinmed.com
邮箱：510663
网址：www.pulinmed.com

Princeton Medical Scientific Co., Ltd
Room503, Building C, No.8 Fukang West Street, Yushu Industrial Park, Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, 510663, China
T: (86)20-82112462
F: (86)20-82119811
E: sale@pulinmed.com




穿行**顺畅**，更快更**舒心**
治疗冠脉血管狭窄病变的优选球囊

PTCA球囊扩张导管

PTCA Balloon Catheter

适应症


适用于冠心病引起的冠状动脉血管狭窄闭塞部位的扩张或支架植入手术时的扩张

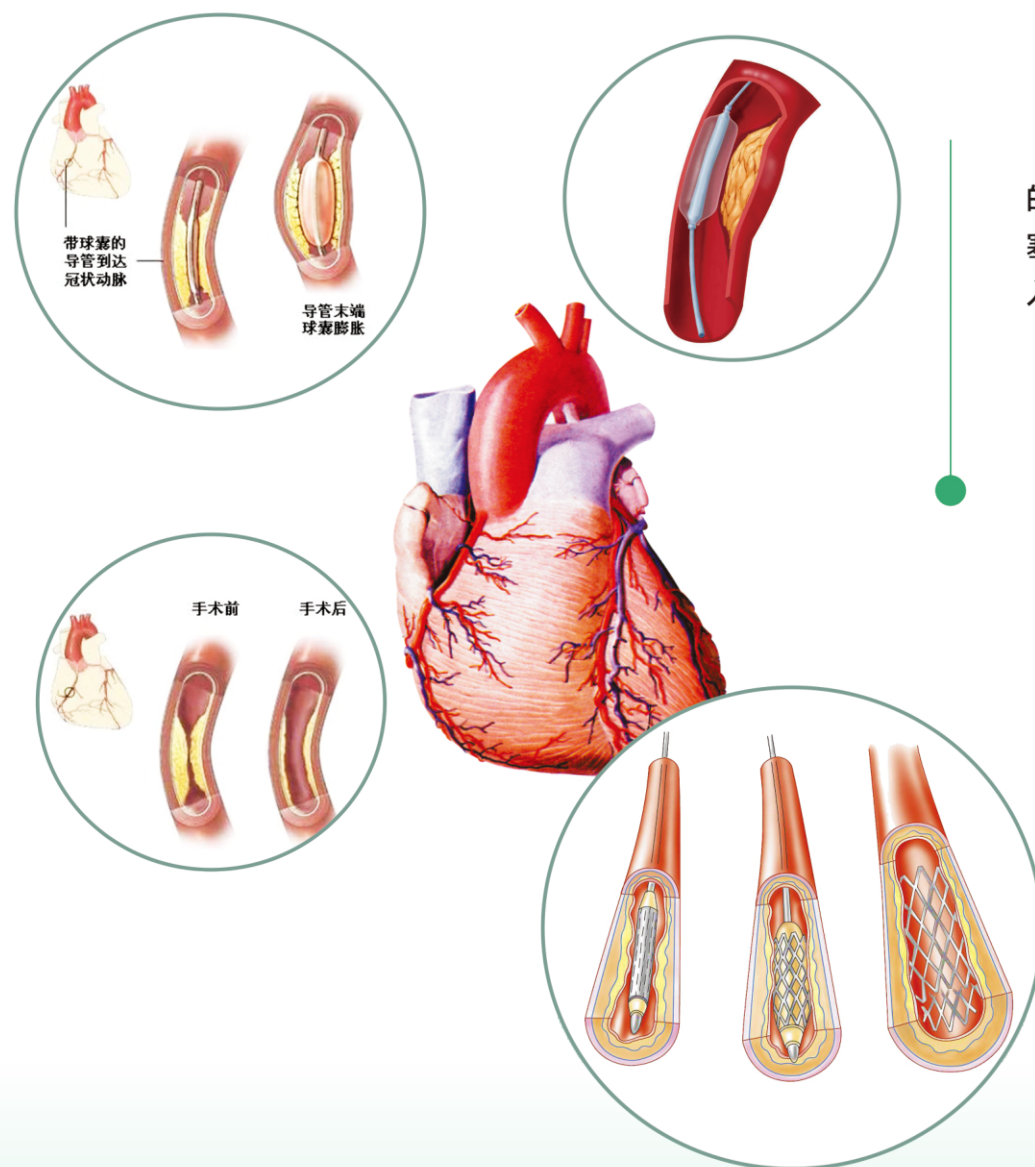

产品特点


1. 球囊导管尖端与导丝无缝贴合

实现优异的跟踪性，避免鱼嘴现象

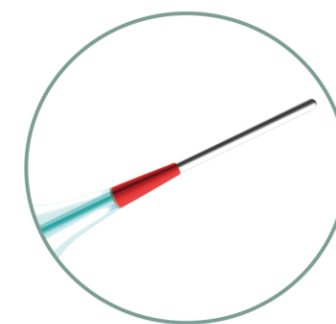


2. 球囊导管头端柔软适度

顺畅通过重度狭窄钙化病变，无损血管内壁

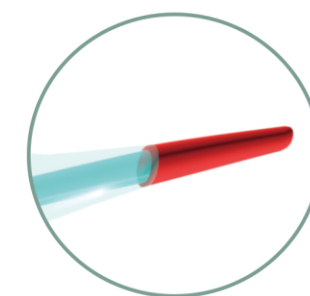

3. 多点精益激光焊接

实现无台阶光滑连接球囊和导管管身，推送更顺畅

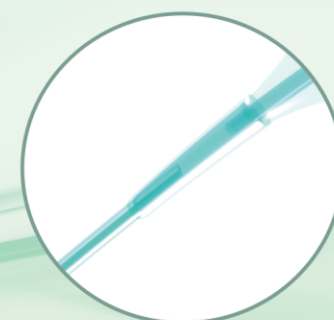

4. 多瓣折叠球囊

实现更小的球囊外径，挑战更狭窄的复杂病变

PCI术前、术后对比图

