

规格参数


球囊直径 (mm)	1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10
球囊长度(mm)	20,40,80,120,150, 210
球囊名义压力(atm)	8
额定爆破压力(atm)	14
兼容导丝(inch)	0.014",0.018",0.035"
导管有效长度(mm)	800,1200,1300,1500
兼容导管直径(F)	5,6,7
近端导管直径(mm)	0.89,1.2,1.75



普霖医疗科技（广州）有限公司
地址：广州市经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503
电话：020-82112462
传真：020-82119811
邮箱：sale@pulinmed.com
邮编：510663
网址：www.pulinmed.com

Princeton Medical Scientific Co., Ltd
Room503, Building C, No.8 Fukang West Street, Yushu Industrial Park, Guangzhou Science City, Luogang District, Guangzhou, 510663, China
T: (86)20-82112462
F: (86)20-82119811
E: sale@pulinmed.com



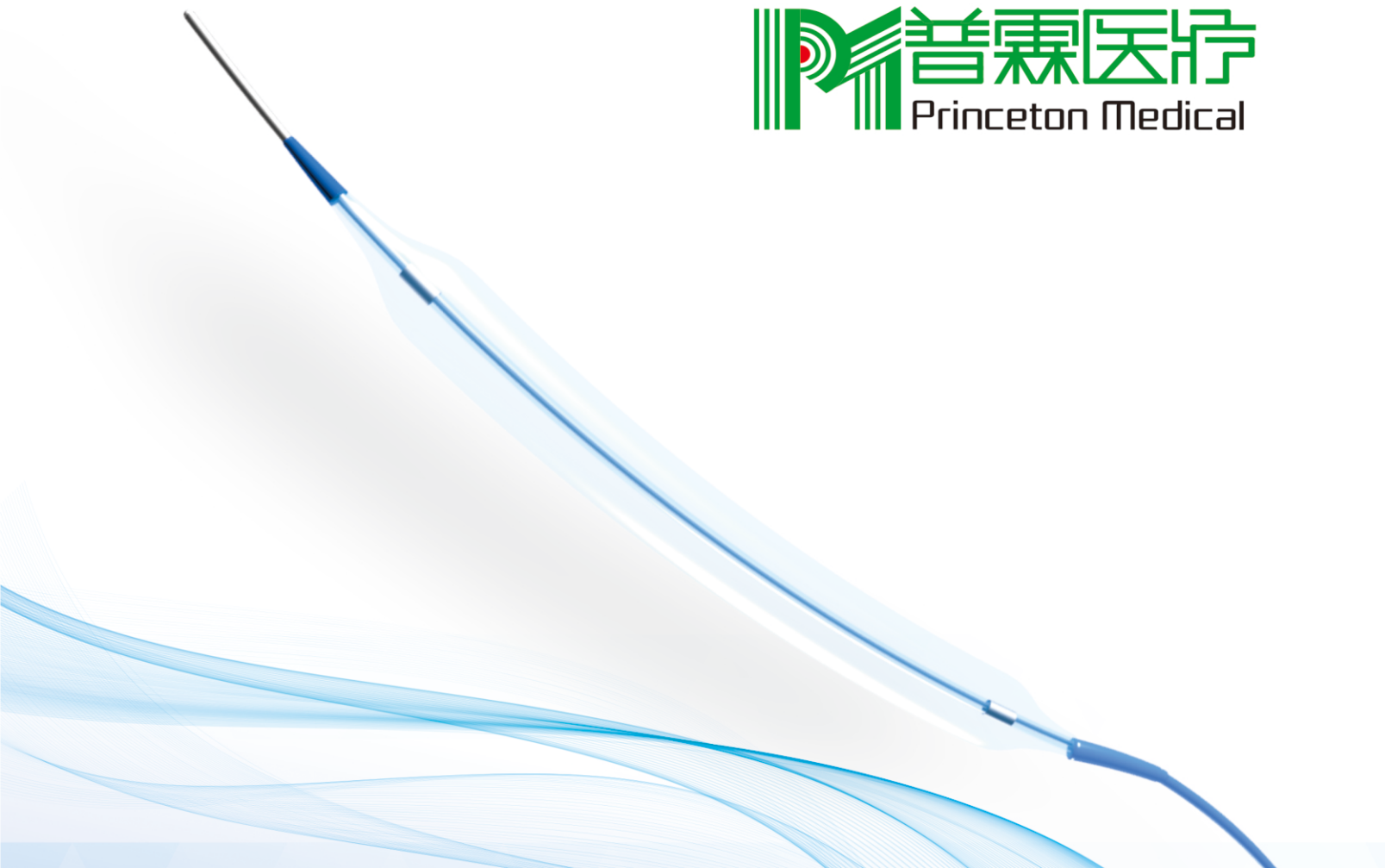

快速到位，精准扩张

治疗下肢动脉狭窄病变的首选球囊

PTA球囊扩张导管

Principal™ PTA Balloon Catheter

产品特点

1.圆锥型球囊设计

超长球囊远端小近端大呈圆锥形更贴合较长病变血管的生理结构
更快通过从膝上到膝下的狭长病变
扩张后贴壁更好，最大限度降低弹性回缩和夹层

2.多瓣精益折叠技术

球囊外径更小,更易通过亚洲人更弯曲细小的病变
多次球囊回抱，扩张贴壁到位

3.激光点焊技术


头端，远端和近端的多点精密焊接降低内摩擦力
超滑导管在扩张腔内快速轻松进入与回撤

4.双腔管设计

通过挑战性病变的推送更轻松
通过翻山病变和狭长病变，抗折弯性能更佳

5. 规格齐全，更多选择

不同球囊直径配备0.014"/0.018"/0.035"三种导丝
适应OTW与RX两种介入方式

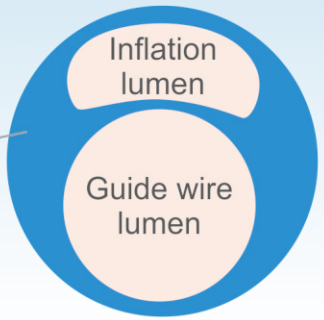

适应症

适用于外周动脉血管粥样硬化闭塞部位的扩张或支架植入手术时的扩张。



临床实验研究结果

PTA球囊扩张导管的多中心、随机、单盲、平行阳性对照临床试验的临床研究结果显示：

在有效性评价的主要评价指标:操作成功率标准需同时满足球囊顺利通过病变、顺利扩张病变、无球囊相关并发症、球囊回撤顺利、与产品标定配套器械的兼容性好5条标准，实验数据表示试验组Principal™PTA球囊非劣于对照组Biotronic公司生产的Passeo-35 PTA球囊。

术中造影

